

DO チップ 5401 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、本書をお読みください。

取り扱い上の注意

● 隔膜に傷を付けないでください

このDOチップには、ごく薄い隔膜が張ってあります。膜面に硬いものを当てたり、強く押ししたりして傷を付けないようにしてください。

● 防水を確実にしてください

このDOチップは、Oリングを介してホルダに取り付け、水の浸入を防いでいます。DOチップにOリングが付いていることを確認し、保護キャップでしっかりと取り付けてください。

● 内部液に触れないでください

DOチップの内部液は強アルカリ性ですので、衣服や皮膚についた場合は、ただちに水洗いしてください。目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗った後、医師の処置を受けてください。


保管

● 保管するときは、ソケットをはめます。

DOチップ単体で保管するときは、ホルダからはずして、必ずソケットをはめ、冷暗所にて保管してください。


取り付け手順

① DOチップをパックから取り出します。
パックの隅に切れ目がありますので、そこから引き裂き、DOチップを取り出します。

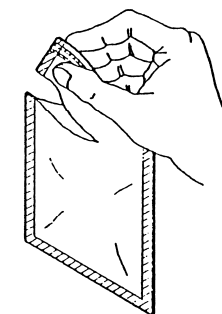


② 保護管をはずします。
セロハンテープを取り除き、保護管をはずします。

③ ソケットをはずします。

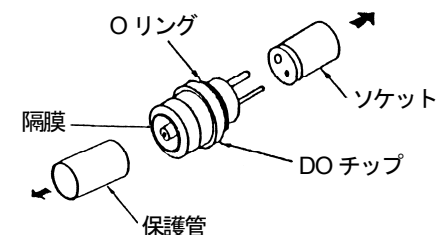

④ ホルダにDOチップを取り付けます。
DOチップのコネクタピンには太い方と、細い方があります。向きに注意して、ホルダにはめ、保護キャップを止まるまでしっかりと回してください。

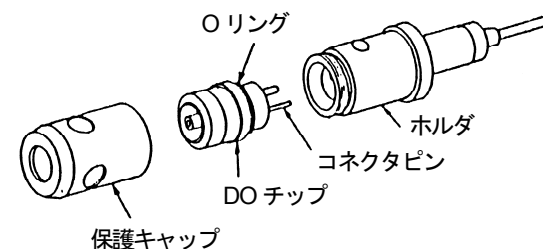

注記) 取りはずした保護管、ソケットは保管時に必要ですので捨てないでください。

株式会社 堀場製作所
〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地
カスタマサポートセンター
フリーダイヤル 0120-37-6045 月～金 9:00～17:00

Instruction Manual for DO Tip 5401

Thank you for your purchasing a HORIBA DO tip. Read this manual carefully before using the electrode tip.

Precautions on Use


- Be careful not to scratch membrane.
DO tip is covered with extremely thin fragile membrane. Do not damage it by hitting or pushing DO tip strongly.
- Ensure complete waterproofing.
DO tip mounted on sensor body is designed to prevent infiltration of sample by means of O-ring. Make sure that O-ring is fitted to DO tip, and tighten it to the sensor body securely.
- Do not touch the inner solution.
The inner solution is strongly alkaline. If it sticks to your cloth or skin, wash it away with water sufficiently. The cornea of an eye is weak to alkali. Do not to allow any droplet of inner solution to contact eyes in particular.

Storage

- Connect the short socket before storage.
When storage of independent DO tip is intended, remove DO tip from the holder. Be sure to connect DO tip to the short socket, and store it in a cool dark place.


Mounting procedure

- ① Take a DO tip out of a pack.
The pack has a notch at its edge.
Tear the pack from there, and take out DO tip.

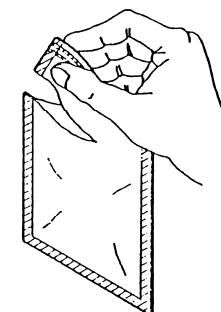


- ② Detach the protective tube.
Remove cellophane tape, and detach the protective tube.

- ③ Disconnect the short socket.

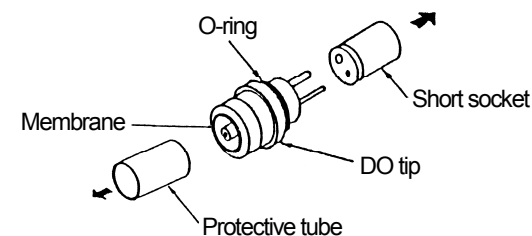

- ④ Attach DO tip to the holder.

Insert the DO tip into the holder in the correct direction, caring the difference of the two connector pins in diameter size, and then screw and fix the protective cap to the holder.

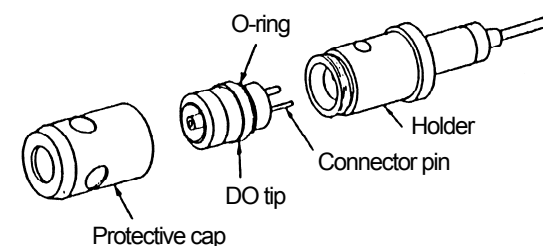

Keep the protective tube and short socket after detaching them from DO tip; you will need them for storing DO tip afterwards.

For any question regarding this product, please contact your local agency, or inquire from the Customer Registration website (<http://www.horiba.com/contact-us/>)

HORIBA, Ltd.

May, 2009 ©1984-2009 HORIBA, Ltd.